


Instruire JL816

1. Prezentare generală a produsului

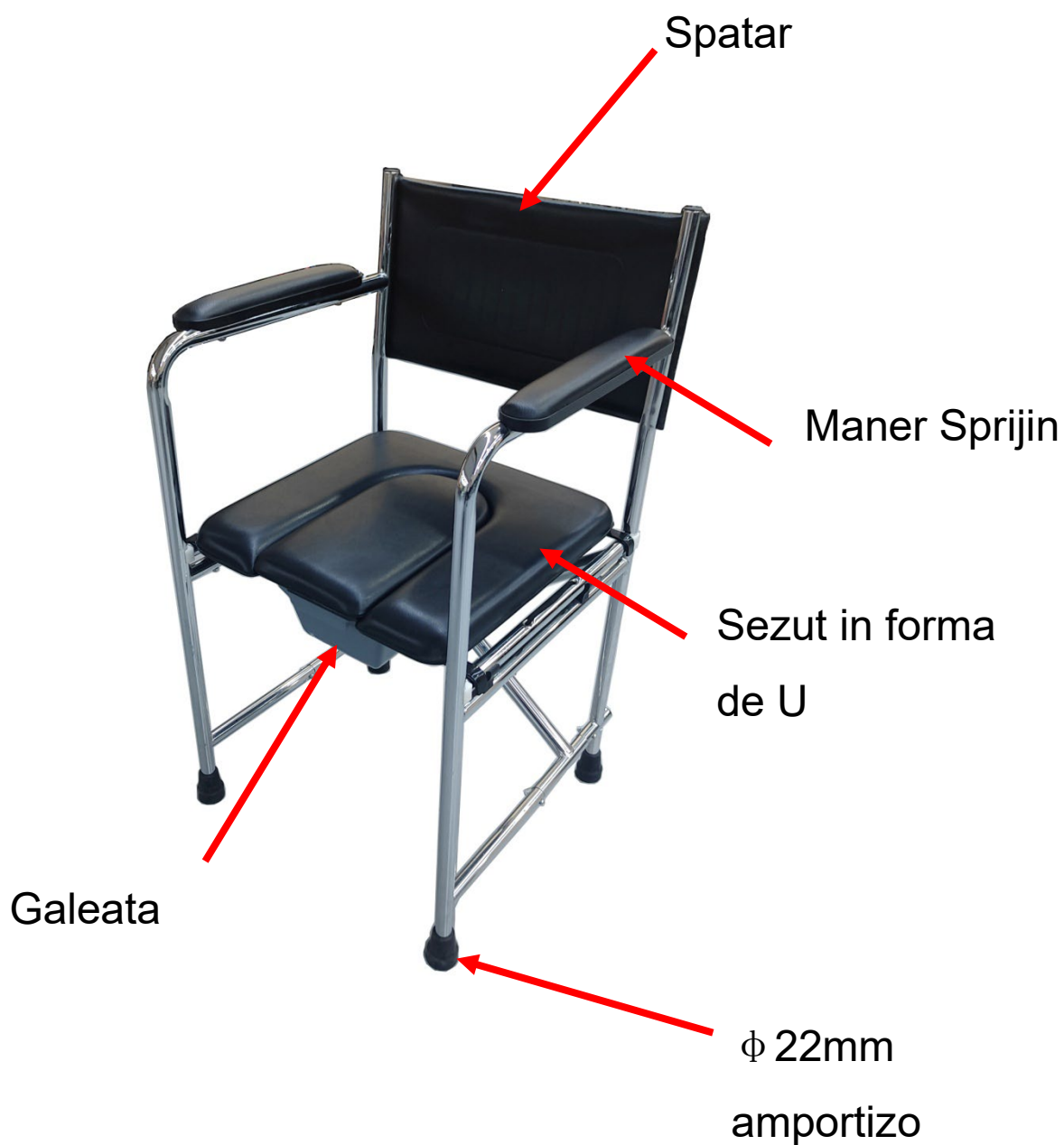

2. Instrucțiuni pentru instalarea produsului

1. Scoate produsul din cutie, așa cum este arătat în Figura a



Figure a

2. Ridică cadrul, apasă tubul orizontal lung în formă de I (partea cercului roșu) cu ambele mâini și deschide încet rama, așa cum se arată în Figura b

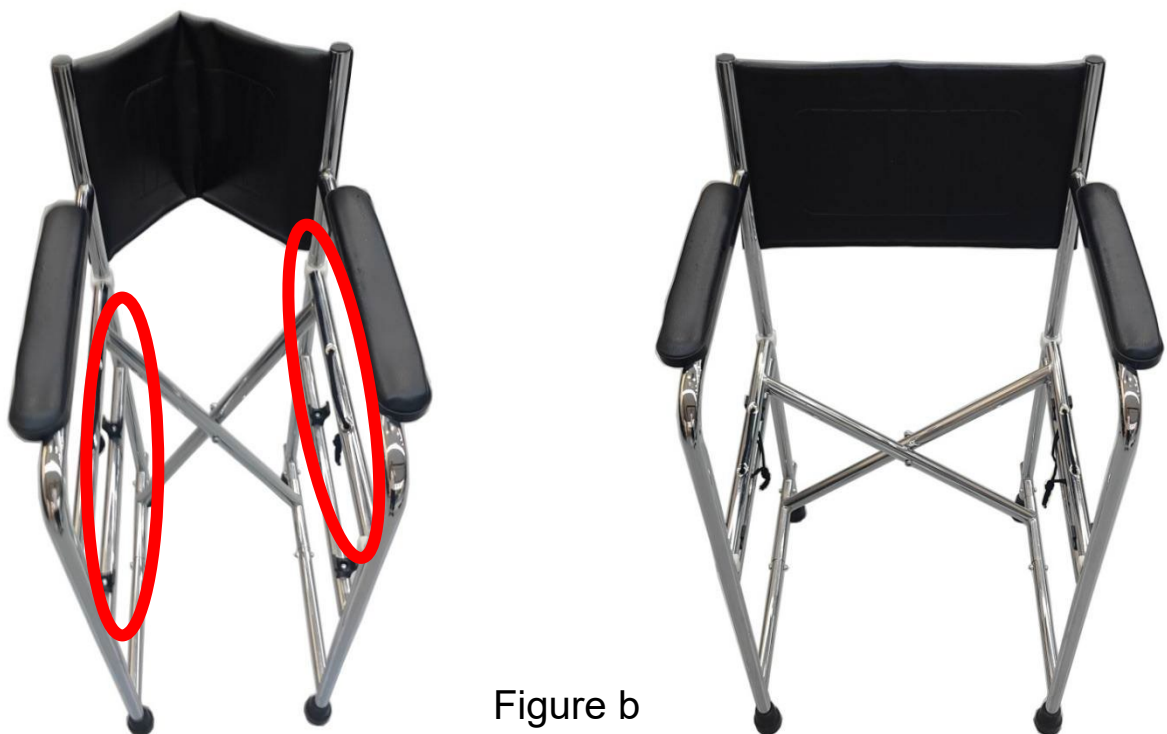


Figure b

3. Așa cum se arată în Figura c, plasați placa de șa pe diagonală în cadrul cadrului pentru a finaliza instalarea plăcii de șezut.



Figure c



4. Așa cum se arată în Figura d, introduceți găleata pătrată de toaletă în șina de ghidare de sub placa scaunului.



Figure d

3. Siguranță și întreținere:

1. Verifică strângerea șuruburilor și stabilitatea cadrului înainte de utilizare;

2. Adaugă regulat o cantitate adecvată de ulei lubrifiant pieselor rotative.;

3. Curăță frecvent și dezinfectează regulat; Plasați într-un mediu uscat și ventilat.