


JL9913 ROLATOR

1. Componente:

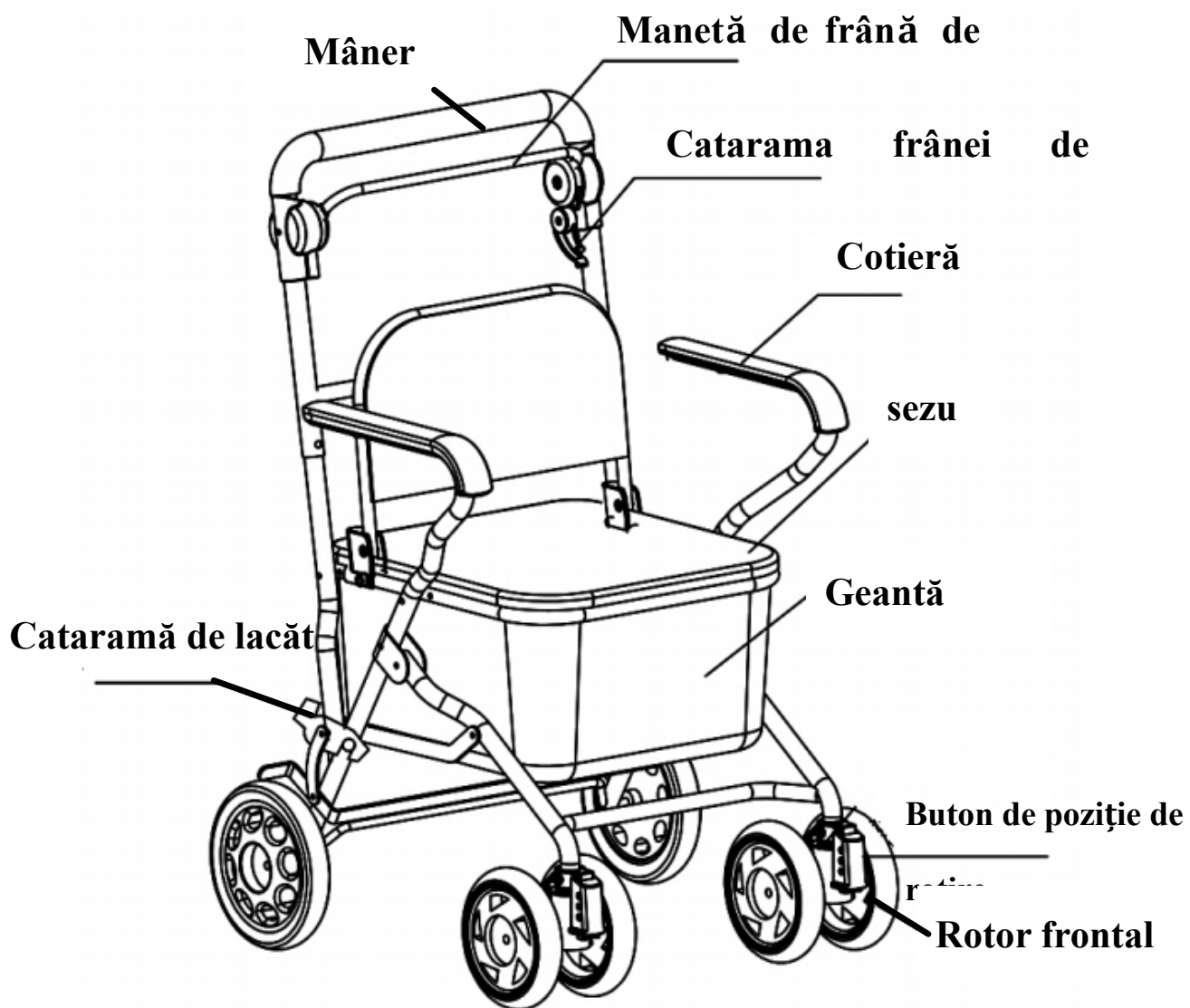

1. Precauții și avertismente:

MEDIU:

- Când vântul sau ploaia sunt puternice sau când ții o umbrelă într-o mână, te rugăm să nu folosești acest rollator cu o singură mână.
- Nu îl așezi aproape de foc pentru a evita deformarea rășinii, care poate duce la incapacitatea de a menține forma rollatorului.
- Nu folosiți și nu plasați în zone cu nisip sau sol, mai ales în zone cu gropi.

ÎN TIMPUL UTILIZĂRII:

- Rollatorul nu este potrivit pentru utilizare în zone publice aglomerate și pe drumuri întunecate noaptea, pentru a evita accidentările și deteriorările.
- Citește manualul de utilizare și toate instrucțiunile și etichetele produsului înainte de a folosi acest rollator.
- Așezarea este interzisă atunci când rollatorul este amplasat pe suprafețe înclinate sau inegale.
- Un tutore trebuie să supravegheze când bătrânii sau copiii stau pe acest rollator. Copiii nu au voie să se joace cu rollatorul. Bebelușii nu au voie să stea în coș sau pe scaun.
- Stați departe de sugari sau copii când pliați sau desfaceți rollatorul.
- Acest rollator nu este folosit în scopuri sportive.
- Nu te baza prea mult pe frâna de mână.
- Nu apăsa pe rollator când frâna de parcare este setată. Setează frâna de parcare când nu este folosită.
- Nu folosiți când roțile din față sunt ridicate.
- Nu pune niciun obiect în puntea de depozitare când pliezi rollatorul. Ai grijă să nu-ți ciupești mâinile când pliezi.
- Când stai jos, asigură-te că setezi frâna de parcare și că scaunul este suficient de plat.

DUPĂ UTILIZARE:

- Curăță noroiul sau murdăria cu o cârpă uscată.
- Nu folosiți soluții diluante sau volatile, cum ar fi benzenul.
- Șterge petele de apă cu o cârpă uscată și lasă-le să se usuce în lumina soarelui.
- Păstrează-l într-un loc ventilat și uscat când nu este folosit mult timp.

- Nu o ține afară când este foarte frig sau cald.
- Păstrează manualul de utilizare împreună cu rollatorul.


ALTELE:

- Stai departe de sugari sau copii.
- Nu demontați, asamblați sau modificați fără autorizație.

2. Instrucțiuni:

ÎN TIMPUL UTILIZĂRII: Scoate rollatorul din cutie și deschide-l. Deși este echipat cu un dispozitiv automat de blocare, ar trebui să verificați de două ori dacă este încuiat.

NOTA: dacă încuietoarea nu este complet închisă, rollatorul se va mișca înainte și înapoi în mod natural. NU sta pe el.

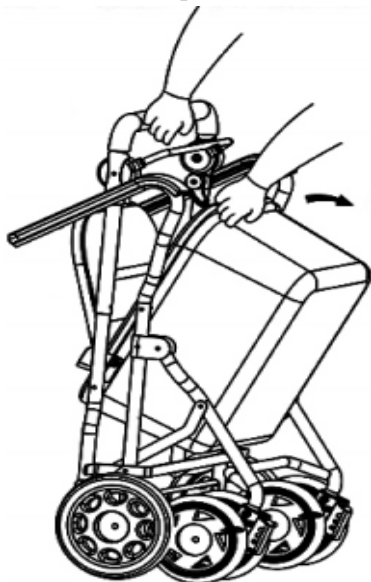

- Deschide catarama pliabilă
- Apasă scaunul până când este complet desfăcut


Catarama




AVERTISMENT DE SIGURANȚĂ: Când stai jos, asigură-te că poziționezi centrul de greutate în centrul panoului șezutului, fixezi catarama de frână și

CUM SĂ FRÂNEZI:

Pasul 1: Ridică maneta frânei de mână și blochează catarama frânei de parcare, apoi rollatorul va fi frânat (dacă vrei să stai jos, te rugăm să frânezi rollatorul).

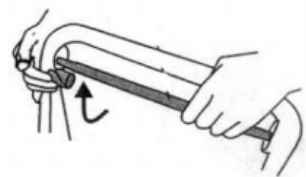


Pasul 2: Rollatorul se va mișca sincronizat cu utilizatorul dacă trage catarama frânei în jos. Ține maneta de frână cu degetele și trage-o în sus pentru a opri rollatorul dacă se oprește sau întâlnește un obstacol.

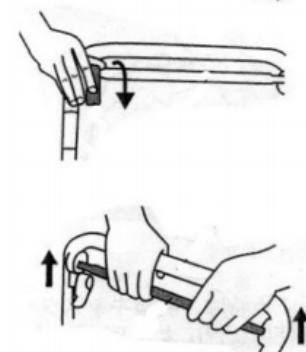

ASAMBLAREA MÂNERULUI ȘI AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII:


Deschide cadrul rollatorului și introduce ghidonul (cu maneta frânei de mână înainte), scoate pinii de blocare stânga și dreapta și ajustează înălțimea potrivită. Am introdus din nou pinul de blocare și am fixat ambele cu capacul. (Ai grijă să blochezi ghidonul și țeava din față. Înălțimea ar trebui să fie constantă pe ambele părți)

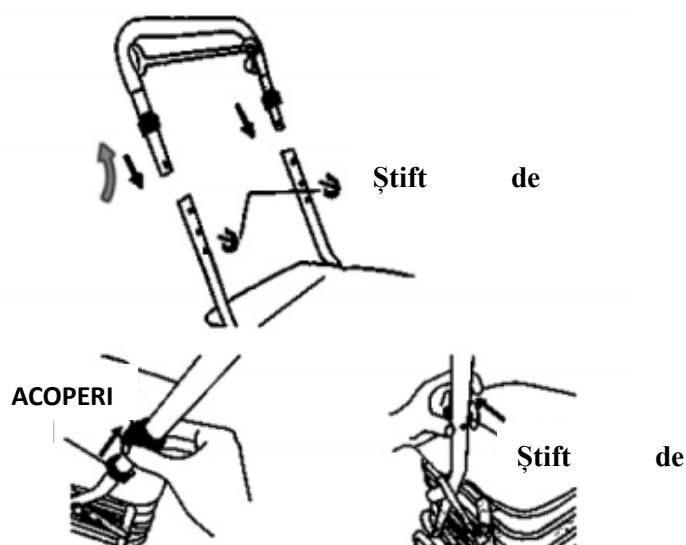

INSTRUCȚIUNI PENTRU ASAMBLAREA ȘI UTILIZAREA ROTILOR:

Roțile din față nu sunt detașabile. Unghiurile de direcție sunt 360° , 90° și 0° (drept înainte).

Roțile din față pot fi rotite la 360°, 90° și 0° apăsând butonul corespunzător.

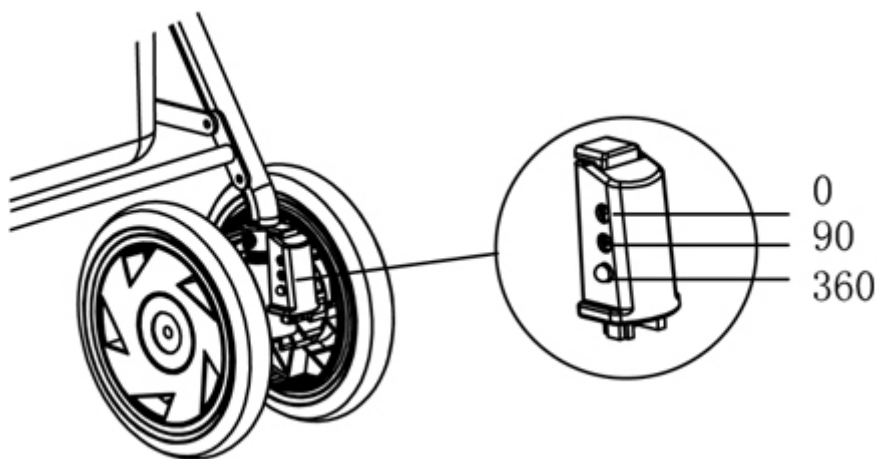


AJUSTAREA SISTEMULUI DE FRÂNARE:

Dacă frâna de mână nu funcționează sau nu funcționează ușor, reglează frânele.


PASUL 1: Eliberați frâna de mână până când rollatorul se mișcă liber

PASUL 2: Folosește unelte pentru a regla butonul și a fixa piulița, rotește butonul de reglaj în sens invers acelor de ceasornic pentru câteva rotiri, confirmă dacă frâna de mână a funcționat, apoi strânge piulița de fixare în sensul acelor de ceasornic

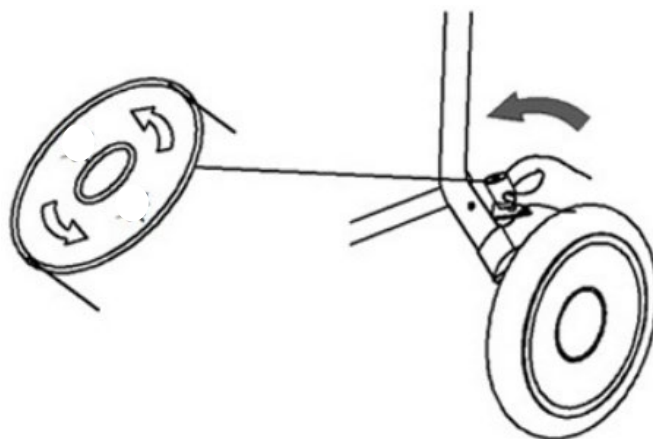

INSTRUCȚIUNI DE PLIERE:

Deschide cataramele de blocare stânga și dreapta, apoi ridică cadrul șezutului și pliază tubul cotierei în jos. Așa cum este imaginea de mai jos.

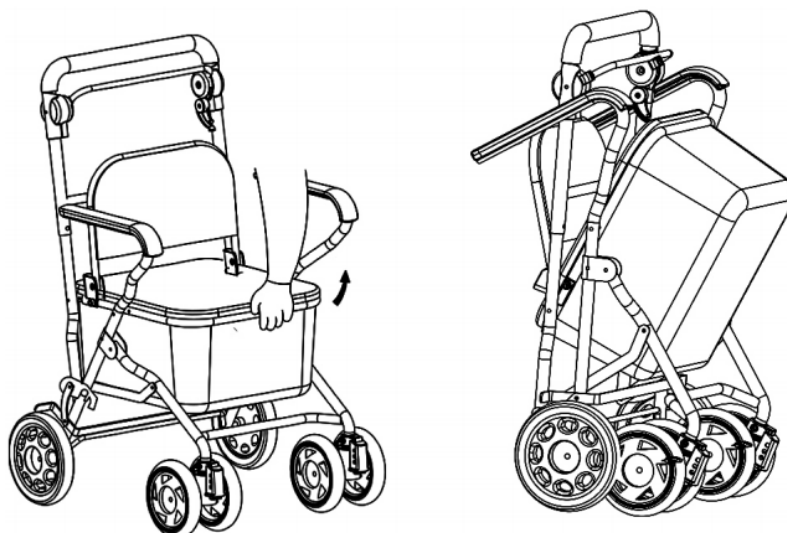

Anexă

DATE TEHNICE

Performanță	Structură semi-automată, de pliere mecanică
Material	Oțel, plastic, PVC etc
Utilizare intenționată	Ajutor pentru mers pe jos
Mediul de utilizare	-5°C ~ 40°C

MEMENTO DE SIGURANȚĂ:

