

Manualul paturilor de spital JL2561



1. Caracteristică

Placă de oțel rece cu suprafață turnată integral

Capul și placa de picior din ABS

Ajustează balustradele din aliaj de aluminiu, care pot fi pliate ușor în sus și în jos

5" vrăjitor alb fără zgomot

Sistem cu două manivele manuale

Ajustează secțiunea din spate

Ajustează secțiunea piciorului

Opțiune: perfuzie, peste noptieră

2. Instalația de asamblare

1) Pentru a economisi volumul de împachetare și transportul în siguranță, patul de spital pe care l-ai primit este parțial detașat. S-ar putea să fie nevoie să montezi placa de cap și picior, roțile, balustradele. Scoate produsul din cutie. Verifică dacă nu există piese deteriorate.

2) Folosiți cheia și cheia Allen pentru a asambla cele două tuburi de susținere. (Figurile 1 și 1)

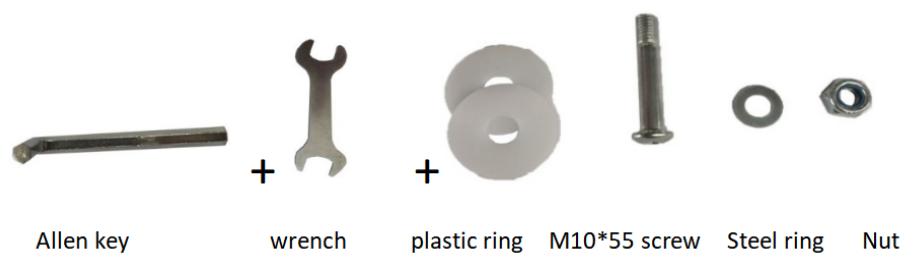


Figura 1 (Accesorii)



Figura 2

3) Folosește cheia și cheia Allen pentru a asambla tubul roții de cadru.
(Figurile 3&4)

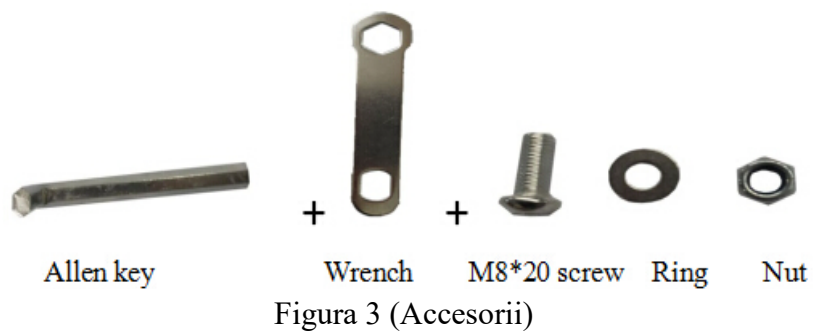


Figura 3 (Accesorii)



Figura 4

4) Folosește cheia și cheia Allen pentru a asambla balustradele de protecție la pat (Figurile 5 și 6)

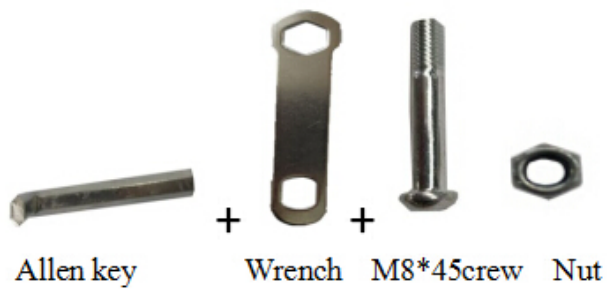


Figura 5 (Accesorii)



Figura 6

5) Asamblează și blochează capul și placa de picior pe cadru. (Figura 7)



Figura 7

6) Ridicat și coborât al balustrada de protecție

Scoate lacătul pentru a coborî parapetul (deblocare).

Trage balustrada laterală până auzi un clic (blocare). (Figură 8)



Figura 8

7) Diferite poziții pot fi ajustate cu un sistem manual de manivelă (Figura 9)

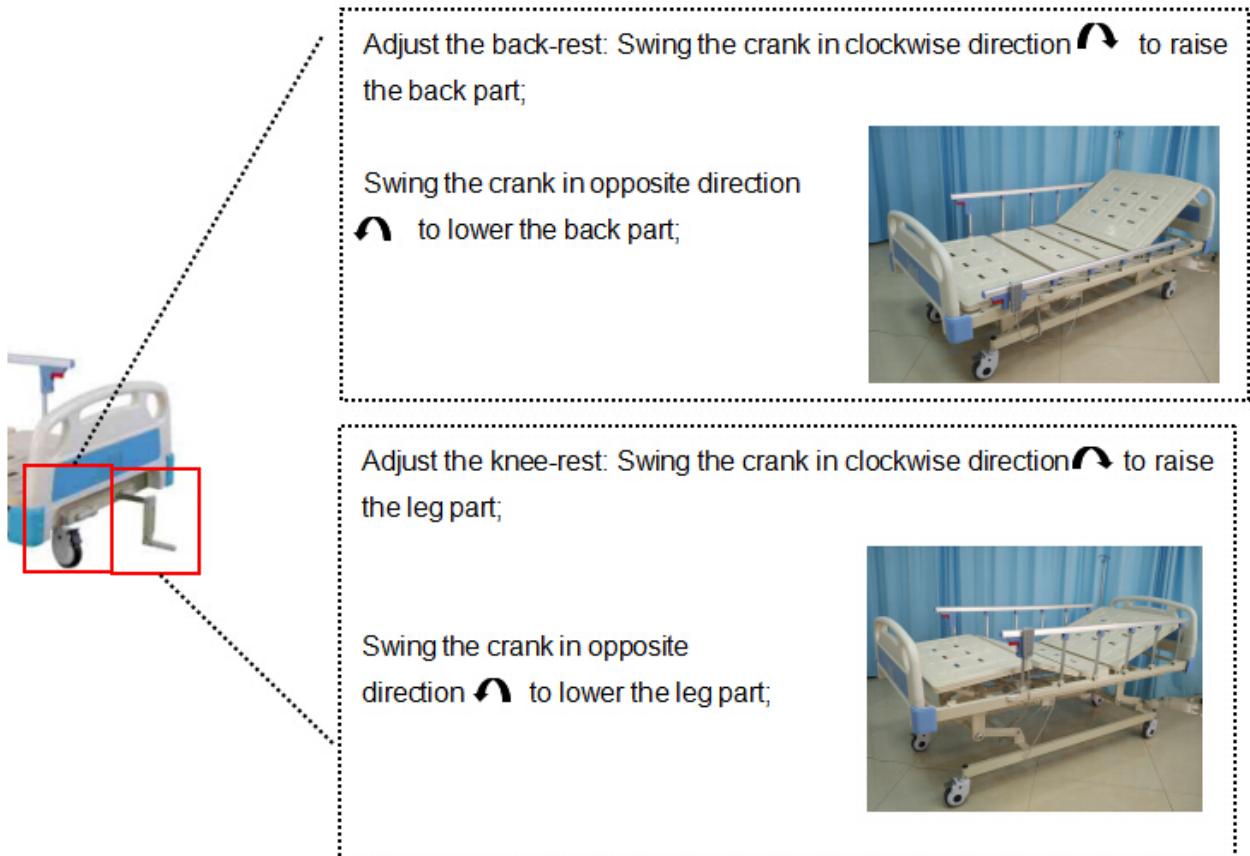


Figura 9

5) Folosind metoda roților.

Poți muta paturile cu sau fără pacient pe pat.

Blochează roțile când te oprești sau localizezi patul.

Pedale de frână pe roți rotice. (Figura 10)

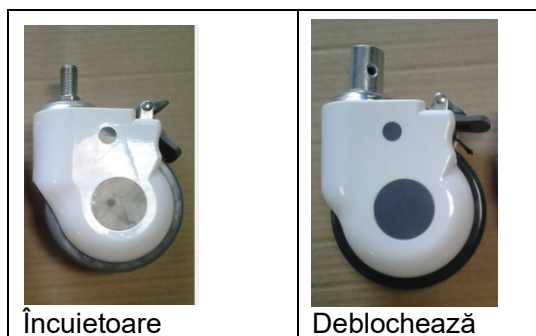


Figura 10

3. Măsuri de siguranță

- Operatorii trebuie să citească cu atenție acest manual, să urmeze instrucțiunile și să se familiarizeze cu procedurile corecte de operare și întreținere ale patului de spital.
- Patul ar trebui să folosească un mediu interior
- Dacă produsul este uzat sau structural defect, nu îl folosiți.
- Înainte de utilizare, vă rugăm să vă asigurați că nu sunt alte lucruri sub pat, toate șuruburile au fost strânse
- Asigurați-vă că mecanismul de blocare și butoanele funcționează corect.
- Când transferi pacienții, asigură-te că blochezi parapetul, capul și placa de picior
- Vă rugăm să împiedicați corpul și mâinile și picioarele, copiii, animalele de companie, obiectele de companie să ajungă în paturile de îngrijire
- Vă rugăm să nu puneți mâinile și picioarele în părțile mobile ale patului, acestea pot provoca leziuni sau fracturi.
- Acțiunile ilegale și barbare și operarea prin suprasarcină (capacitate maximă de greutate: 175 kg) sunt interzise, pentru a evita deteriorarea patului de spital în mod necorespunzător.
- Nu demontați sau detașați produsele fără permisiune autorizată. Nu folosiți piese de schimb neautorizate