

JL2010 Scaun multifuncțional



Descriere


1. Asistarea persoanelor cu mobilitate redusă în trecerea de la pat la canapea, scaun cu roțile, toaletă
2. Reglați înălțimea totală de la 805-1005 mm
3. Cadru din oțel alb durabil
4. Cu pernă moale și Găleată gri și capac
5. Roți de 4"

Specificatii


Nr. articol	JL2010
Lungime totală	70cm
Lățime deschisă	59,5 cm
Înălțime totală	80,5-100,5 cm
Lățimea scaunului	46cm
Adâncimea scaunului	35cm
H:	44-64cm
Greutate netă:	24kg
Dia. a roții din spate	4"
Dia. De roată frontală	4"
Plafonul de greutate.	100 kg

Instrucțiuni de instalare

1) Fixați suportul tubului roții din spate pe bază cu șuruburi, garnituri și piulițe, iar metoda de instalare este aceeași pentru cealaltă parte. După cum se arată în figura A.

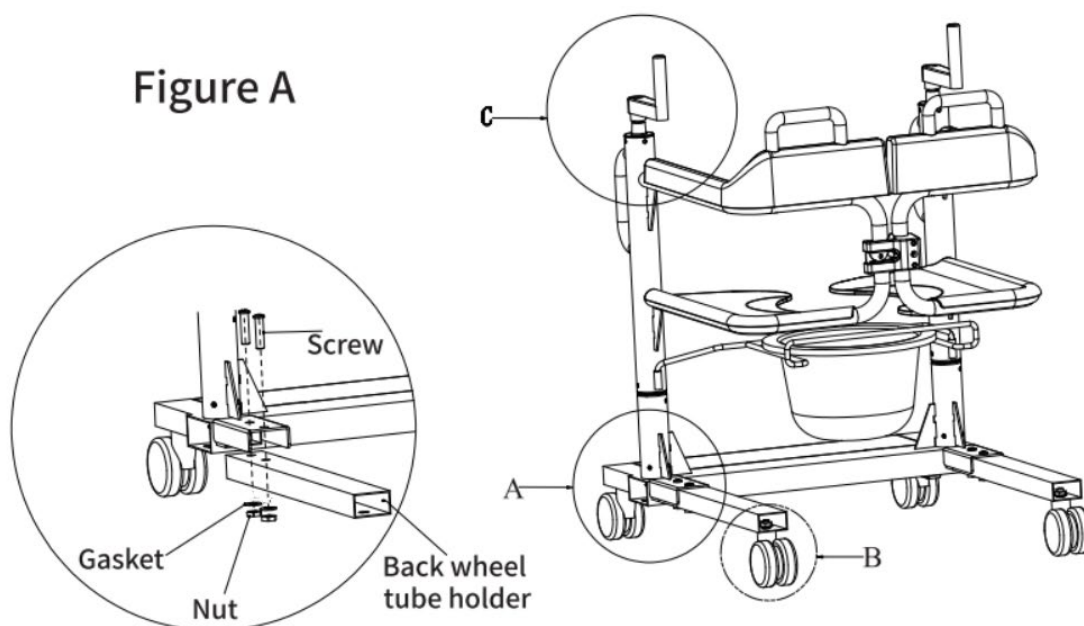

2. Introduceți șuruburile de pe roata direcțională în orificiile dintr-un suport pentru tuburi de roată din spate. Puneți garnitura și piulițele de blocare pe rând și strângeți piulițele cu o unealtă. Alte role sunt fixate prin aceeași metodă. Când strângeți piulițele, asigurați-vă că roțile sunt strânse în aceeași direcție ca și tuburile roții din spate. După cum se arată în figura B

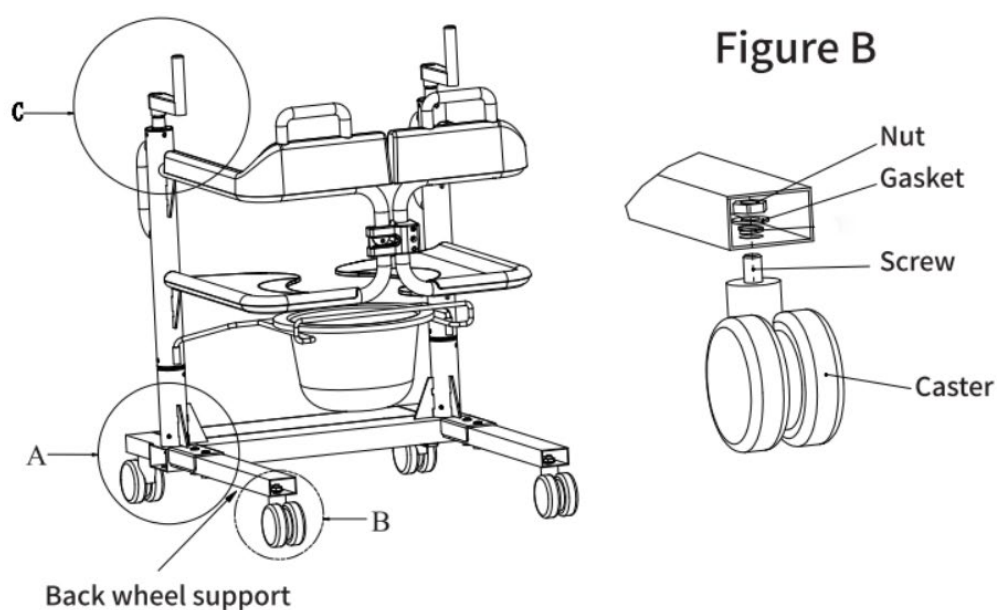

3. Introduceți cadrul scaunului din stânga și din dreapta în coloana de sprijin corespunzătoare din stânga și, respectiv, din dreapta, apoi rotiți-le înainte și înapoi în timp ce le apăsați în jos până în poziția de jos. După cum se arată în figura C

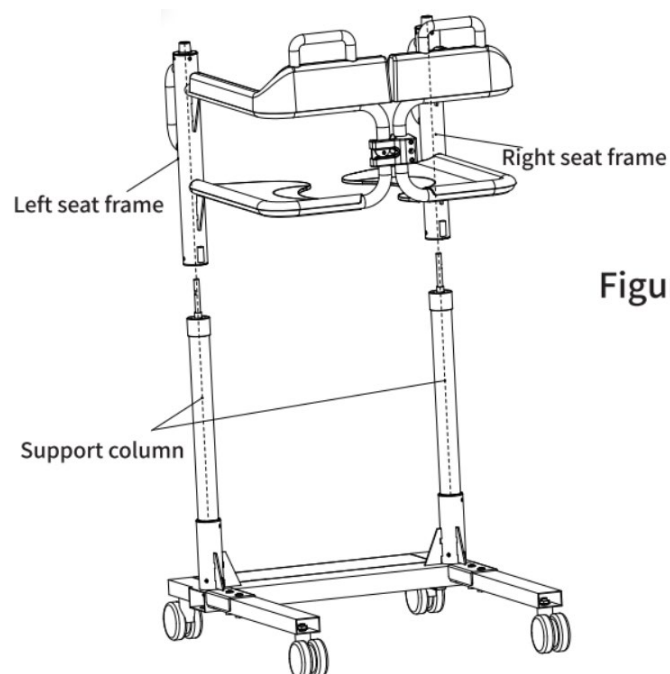


Figure C

4. Introduceți un mâner în arborele șurubului superior al cadrului scaunului din stânga, apoi fixați-l cu un șurub. Șurubul trebuie aliniat cu masa orizontală de pe arborele șurubului și strâns, iar partea dreaptă trebuie fixată în aceeași metodă. După cum se arată în figura D


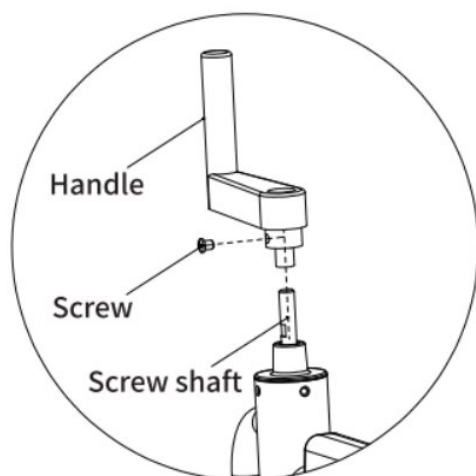


Figure D

5. Dacă este nevoie de tigaie, introduceți mai întâi cele două capete ale suportului tigaiei de pat cu precizie în tubul de montare a suportului tigăcii, apoi introduceți tigaia în suportul tigăcii din partea din spate. După cum se arată în figura E

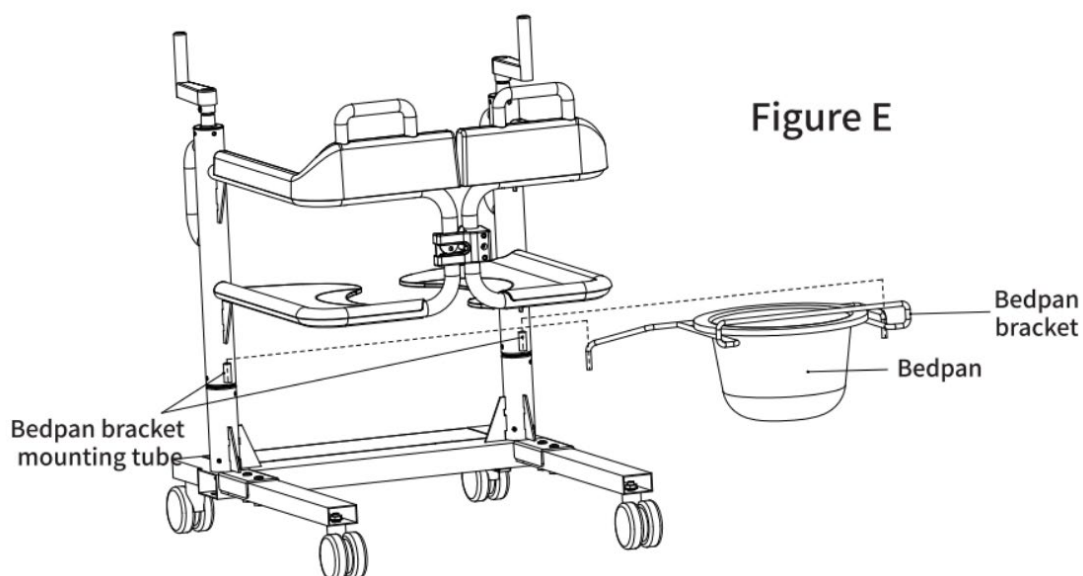

Avertisment

1. Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să verificați dacă toate piesele sunt instalate în poziție și dacă sunt bine instalate pentru a asigura siguranța utilizării dvs.
2. Vă rugăm să reglați la înălțimea corespunzătoare înainte de utilizare și să vă asigurați că cadrul scaunului din stânga și din dreapta sunt menținute la aceeași înălțime.
3. Când utilizatorul se așează sau coboară de scaunul în mișcare, vă rugăm să călcați pe pământ și să nu stați pe pedală, altfel este ușor să răsturnați scaunul în mișcare și să provocați victime inutile.
4. Când utilizați scaunul în mișcare, asigurați-vă că blocarea de siguranță și centura de siguranță sunt în starea de blocare.
5. Când utilizatorul se așează sau coboară din scaunul în mișcare, asigurați-vă că roțile sunt în stare de blocare.
6. Când utilizatorul stă pe scaunul în mișcare și dorește să ridice obiecte dincolo de scaunul în mișcare, acordați atenție înclinării corpului pentru a nu se înclina prea mult și pentru a menține centrul de greutate al corpului în intervalul celor patru roți cât mai mult posibil, astfel încât să se evite răsturnarea scaunului în mișcare din cauza pierderii centrului de greutate al scaunului.
7. Când stați pe scaunul în mișcare, nu vă aplecați prea jos pentru a face centrul de greutate al utilizatorului dincolo de cele 4 roți pentru ridicarea obiectelor de pe sol, provocând victime inutile.

8. La reglarea înălțimii scaunului, roțile trebuie blocate; mânerle de pe ambele părți trebuie scuturate sincron și uniform.
9. Nu grăbiți treptele prin inerție, altfel va provoca accidente utilizatorului și deteriorarea scaunului în mișcare. La urcarea și coborârea scârilor, operatorul nu trebuie să mute pacientul sau persoana cu handicap împreună cu scaunul în mișcare, altfel va aduce un pericol inutil utilizatorului.
10. Scaunul în mișcare este potrivit pentru a se deplasa pe teren plat; Evitați gropile și obstacolele, astfel încât să preveniți pericolul de răsturnare pentru a provoca victime.
11. Când panta de coborâre depășește 5 grade, operatorul trebuie să se îndrepte spre spătarul scaunului în mișcare înainte și să coboare înapoi, confirmând cu atenție că este sigur. Dacă scaunul în mișcare este orientat înainte la coborâre, utilizatorul se poate apleca înainte și poate cădea. Dacă nu sunteți sigur că puteți controla scaunul în mișcare atunci când coborâți, vă rugăm să apelați la alții pentru ajutor.
12. Nu rămâneți pe un teren în pantă. Când rămâneți pe un teren înclinat, toate cele patru roți trebuie blocate și timpul de ședere nu trebuie să fie prea lung. În același timp, cineva ar trebui să controleze scaunul în mișcare pentru a asigura siguranța personalului.
13. Frâna celor patru roți ale scaunului mobil se utilizează numai pentru frânarea la parcare și nu se utilizează pentru decelerare și frânare atunci când scaunul este în mișcare.